PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, www.rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYWANIA
PODPÓRKA DWUKOŁOWA Z SIEDZISKIEM RF-651



I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.


Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.

UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

PARAMETRY TECHNICZNE

Nr katalogowy:	**RF-651**
Max. bezpieczne obciążenie:	113 kg
Regulacja wysokości uchwytów:	78–98 cm
Całkowita szerokość:	55 cm
Głębokość:	52 cm
Waga:	5 kg

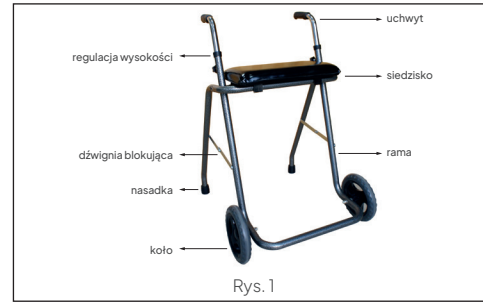

Rys. 1

ELEMENTY PODPÓRKI

Elementy podpórki są przedstawione na rys. nr 1.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	Żelazo
Koła	EVA (etylen-co-octan winylu) + PP (polipropylen)
Uchwyty	PVC (polichlorek winylu)
Siedzisko	PVC (polichlorek winylu) + gąbka + drewno
Dźwignia blokująca	Żelazo
Nasadki	Guma

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Podpórka przeznaczona jest dla osób starszych i niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu lub z problemem pionizacji. Podpórka przeznaczona jest do pomocy dla osób, które wymagają wsparcia podczas chodzenia, w przypadku zmęczenia zapewnia także możliwość spoczynku. Może być użytkowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Pomaga w codziennych czynnościach, np. wstawaniu z łóżka, chodzeniu, korzystaniu z toalety, spacerze, zakupach.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na podpórce, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające utrzymanie równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:
1. Zawsze przed użyciem podpórki upewnić się, że jest on prawidłowo zablokowana w pozycji rozłożonej.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia podpórki.

3. Nie przewozić na siedzisku elementów mocno wystających poza jego obszar, ponieważ może to wpłynąć na stabilność podpórki.
4. Podczas korzystania z podpórki zawsze zachować wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
5. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie podpórki w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
6. Korzystanie z podpórki w środowisku o dużej wilgotności (prysznic, basen itp.) może wywołać korozję jego ruchomych elementów, co w efekcie może spowodować jej uszkodzenie.
7. Nie korzystać z podpórki podczas chodzenia po schodach oraz schodach ruchomych.
8. Nie przechować podpórki w temperaturze poniżej 0°C. Nie wystawiać podpórki na długi czas w temperaturze powyżej 40°C, ponieważ może to spowodować przegrzanie elementów podpórki i poparzenie użytkownika.
9. Zawsze należy przestrzegać minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej wysokości rur przesuwnych.
10. Nie wieszaj toreb ani worków na uchwytach - niebezpieczeństwo przewrócenia!
11. Użyj hamulca głównego na stromych powierzchniach.
12. Nigdy nie używaj podpórki do poruszania się, gdy jest złożona!
13. Jeśli zbyt mocno oprzesz się o uchwyty, podpórkę może przechylić się do tyłu.
14. Używanie podpórki do celów innych niż chodzenie, takich jak transport ciężkich ładunków, jest nieodpowiednie i niebezpieczne.
15. Stosować na różnych i twardych powierzchniach.
16. Nie stosować jako zamiennik wózka inwalidzkiego.
17. Nie używać na pochyłym terenie

UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpiecznego używania może doprowadzić do poważnych wypadków.

UWAGA! Przed użyciem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia odnośnie braku przeciwskazań do używania wyrobu.

UWAGA! Jeżeli podpórka jest prawidłowo wyregulowana, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi, wówczas podczas chodzenia część ciężaru ciała przejmuje podpórka.

VI. SPOSÓB UŻYWANIA

MONTAŻ PODPÓRKI

1. Podpórka jest dostarczana w pełni wyregulowana i zmontowana z wyjątkiem uchwytów do prowadzenia.
2. Dopasuj rączki do pionowych rurek ramy podpórki:
   - Włóż rurkę rączki do otworu (odpowiadającego jej wielkością) w pionowej rurce ramy podpórki.
   - Umieść rączkę na żądanej wysokości i zakręć pokrętło na odpowiednim otworze.
   - Sprawdź czy rączka jest prawidłowo zabezpieczona. Powtórz czynność z drugą rączką.

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE PODPÓRKI

Aby rozłożyć:

1. Chwyć przednią ramę podpórki jedną ręką i tylną, ruchomą ramę drugą ręką i odciągnij je od siebie.
2. Zablokuj rozłożoną ramę podpórki poprzez pchnięcie do dołu dźwigni blokującej znajdującej się po bokach podpórki. Upewnij się, że do końca zamknąłeś dźwignię blokującą.
3. Obróć siedzisko aż do zablokowania na ogranicznikach tak, aby znalazło się w pozycji równoległej do podłogi, miękką częścią do góry.

Aby złożyć:

1. Odchyl siedzisko.
2. Pociągnij do góry dźwignię blokującą znajdującą się po bokach podpórki.
3. Złap za przednią ramę podpórki jedną ręka i tylną, ruchomą ramę drugą ręką a następnie przyciągnij je możliwie najbliżej siebie.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę podpórki pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
   - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
   - śruby są prawidłowo dokręcone;
   - pokrętła prawidłowo zabezpieczają ustawioną wysokość rączek;
   - żadne inne części podpórki nie są poluzowane lub uszkodzone.

UWAGA! Jeśli zachodzi taka konieczność, należy wymienić lub wyregulować odpowiednie części. W razie potrzeby należy nasmarować części mechaniczne.

UWAGA! Zaleca się regularne czyszczenie podpórki miękką szmatką i wodą z mydłem. Podpórka po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Do czyszczenia podpórki nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających. Urządzenie można dezynfekować alkoholem lub pochodnymi, ale o niskim stężeniu.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli podpórki zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA

Przewidziany okres używania podpórki to 5 lat. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.

Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
CE	Oznakowanie CE	LOT	Kod partii
REF	Numer katalogowy	QTY	Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
MD	Wyrób medyczny		Kruchy,obchodzić się ostrożnie
UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Przechowywać z dala od światła słonecznego

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl

CE

I/RF-651/3/16.10.2024
Data wydania instrukcji używania 10.2024 v.3