PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, www.rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYWANIA

WÓZEK TOALETOWY MARCO 802
WYRÓB MEDYCZNY



Nr katalogowy:	**RF-802**
Całkowita szerokość:	55 cm
Szerokość siedziska:	46 cm
Głębokość siedziska:	40 cm
Średnica kół:	13 cm
Wysokość siedziska:	50,5 cm
Całkowita długość:	85 cm
Regulacja wysokości:	95,5-98 cm
Regulacja wysokości oparcia:	45,5-48 cm
Max. bezpieczne obciążenie:	120 kg
Waga:	13,5 kg

⚠ **UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z wózka toaletowego, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami**

PRZEZNACZENIE

Wózek toaletowy spełnia funkcję przenośnej toalety. Zapewnia utrzymanie higieny osobistej. Wózek można użytkować przy łóżku pacjenta lub w łazience. Może służyć również do transportowania użytkownika przez asystenta.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed korzystaniem z wózka toaletowego upewnić się, że kółka są w dobrym stanie i wózek stoi stabilnie.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie wózka toaletowego w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia wózka toaletowego.
4. Nie przechować wózka toaletowego w temperaturze poniżej 0°C.
5. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

⚠ **UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.**

SIADANIE I WSTAWANIE

1. Upewnij się, że wózek stoi stabilnie i jest gotowy do użycia.
2. Stań tyłem do wózka tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.
3. Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na podłokietnikach.
4. Powoli siadaj na wózku, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe kolana oraz biodra.
5. Aby wstać z wózka, oprzyj dłonie na poręczach i podnieś się. Zanim puścisz podłokietniki wózka, upewnij się, że utrzymujesz równowagę.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę wózka toaletowego pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
   - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania,
   - koła nie uległy zniszczeniu – jeżeli tak, należy je wymienić,
   - żadne inne części wózka toaletowego nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie wózka toaletowego miękką szmatką i wodą z mydłem. Wózek toaletowy po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Wiaderko można dezynfekować na zimno np. etanolem.

⚠ **UWAGA! Do czyszczenia wózka toaletowego nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.**


SPOSÓB MONTAŻU

rys. 1

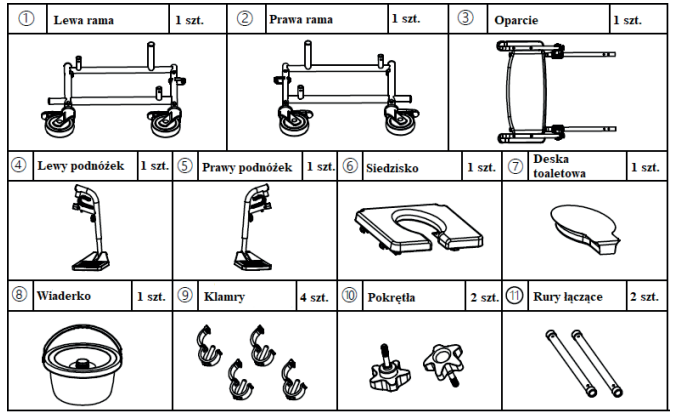


1. Produkt jest przeznaczony do samodzielnego montażu bez użycia narzędzi.
2. Przed montażem sprawdź listę części (rys.1).
3. Włóż część 11 do części 1, jak jest pokazane na rysunku nr 2. Jednocześnie wyrównaj boczne otwory w obu częściach.
4. Włóż część 9 w otwór i zapnij blokadę bezpieczeństwa, jak jest pokazane na rysunku 3.
5. Włóż część 2 do części 11, jak jest pokazane na rysunku 3. Jednocześnie wyrównaj boczne otwory w obu częściach.
6. Włóż część 9 w otwór i zapnij blokadę bezpieczeństwa, jak jest pokazane na rysunku 3.
7. Włóż część 3 w dysze, jak jest pokazane na rysunku 3. Jednocześnie wyrównaj boczne otwory.
8. Wkręć części 10, ustaw wysokość oparcia na odpowiednim poziomie.


rys. 2

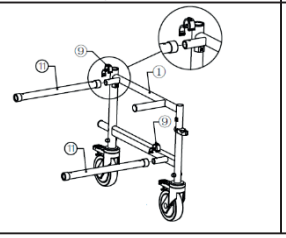

rys. 3

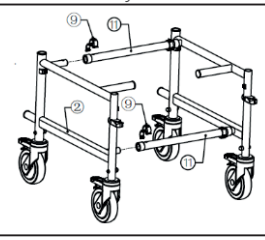

rys. 4

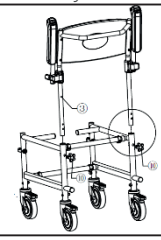

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

rama	aluminium
oparcie	PU (poliuretan)
podłokietnik	PU (poliuretan)
siedzisko	PU (poliuretan)
podnóżek	PA (poliamid)
koło	PP (polipropylen) + TPR (guma termoplastyczna)

GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).
Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
CE	Oznakowanie CE	LOT	Kod partii
REF	Numer katalogowy	QTY	Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
MD	Wyrób medyczny		Kruchy,obchodzić się ostrożnie
UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl

CE

I/RF-802/4/03.10.2024
Data wydania instrukcji używania: 10.2024 v.4